


PRÄZISIONS DIAMANTDRAHTSÄGEN 3500



« Premium » Ausführung

WELL DIAMANTDRAHTSÄGEN erreichen glatte, scharfkantige Oberflächen bei praktisch jedem Material. Das angewandte „Schneidewerkzeug“ ist rostfreier Stahldraht mit Diamantkörnern, welche in den Draht sozusagen eingebettet sind. Dieser patentierte Einbettungsprozess gewährleistet ein Höchstmaß an Schneidefähigkeit und die Langlebigkeit des Drahtes. Der Draht ist auf eine Trommel gewickelt, die auf einem Präzisions-Hubmotor montiert wird.

Nichtsdestotrotz dürfte es widersprüchlich erscheinen, dass WELL DIAMANTDRAHTSÄGEN beim Schneiden das Material nicht beschädigen oder verformen. Das gilt gleichermaßen für homogene sowie für gebundene Materialien verschiedenster Eigenschaften der Zusammensetzung.

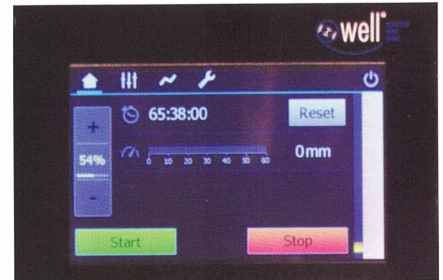

CH-2400 Le L
Swiss Made
230V / 50-60

Metalle, Kunststoffe, Quarz, Glas, Graphit und Keramik sind bloß einige von vielen natürlichen und synthetischen Materialien, die erfolgreich in Anwendungsgebieten der *Forschung und Entwicklung, Qualitätskontrolle, Fehleranalyse* und *Produktion* geschnitten werden können. Der Präzisionsschnitt und die daraus resultierende Glätte machen Polieren häufig überflüssig bzw. reduzieren die Polierdauer für Werkstücke, die früher gründlich poliert werden mussten, ganz erheblich.

Zusätzlich zu der gewerblichen Verwendung werden unsere Drahtsägen in Anwendungsbereichen der:


- Metallographie
- Geologie
- Archäologie und Paläontologie
- Kriminologie und Gerichtsmedizin
- Biologie
- Pathologie
- Histologie
- Anatomie sowie der Zahnmedizin eingesetzt.

WELL DIAMANTDRAHTSÄGEN GmbH glaubt, dass Qualität quantitativ bestimmbar ist. Unsere Sägen sind so gestaltet und gefertigt, dass sie anderen helfen, die qualitativ gewünschten Ergebnisse zu erzielen – ungeachtet ihrer Bestimmung und unabhängig davon, ob die Anwendung im Bereich der *Forschung und Entwicklung, Produktion, Qualitätskontrolle* oder *Schadenanalyse* anzusiedeln ist.




« Base »
Ausführung


Beispiel Zubehöre (andere auf Anfrage)

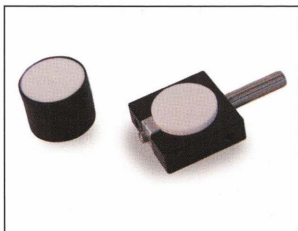

Standard Probehalter

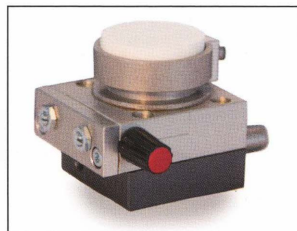

Drehtisch

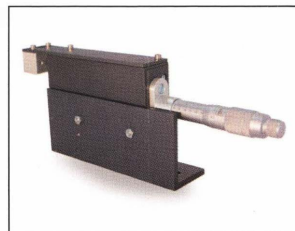

Mikrometertisch



Kreuztisch



WELL Diamantdrahtsägen GmbH

Luzenbergstraße 82
68305 Mannheim
Deutschland

info.de@well-dws.com
www.well-deutschland.de

Tel. +49 (0)6 21 74 19 90
Fax +49 (0)6 21 74 58 97

WELL Diamond Wire Saws SA

Crêt-Vaillant 17
2400 Le Locle
Schweiz

info.ch@well-dws.com
www.well-dws.com

Tél. +41 (0)32 931 17 91
Fax +41 (0)32 931 23 36

WELL Diamond Wire Saws, Inc.

4708 S. Old Peachtree Road, 500 D
Norcross GA 30071
United States Of America

info@welldws.com
www.well-dws.com

Tel. +001 770-582-9357
Fax +001 770-582-9339